

hyrax[®]hyrax[®]  clickhyrax[®]  neo

Śruby ekspansyjne do różnych zastosowań.

WYŁĄCZNY IMPORTER

polkard[®]

Polkard Sp. z o. o.
ul. Jaroszyka 3
10-687 Olsztyn
NIP: 739-020-05-25


tel. 89 541 83 83
fax 89 541 83 83 w. 112
e-mail: polkard@polkard.pl
www.polkard.pl, www.sklep.polkard.pl

D
DENTAURUM

Śruby **hyrax**[®] i **hyrax**[®] neo

(Hygienic Rapid Expansion Screw)

to śruby specjalne przeznaczone do szybkiej ekspansji podniebienia z użyciem aparatów stałych.

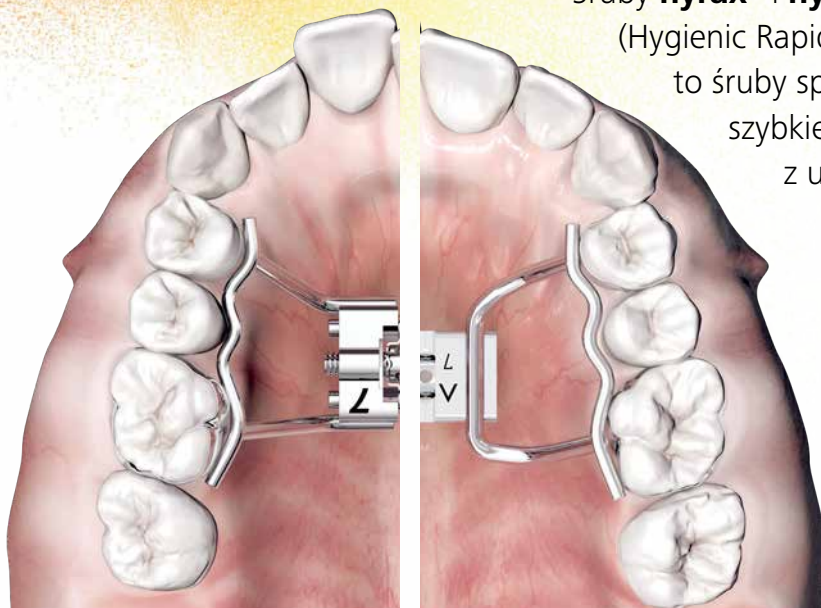


hyrax[®]
hyrax[®]  **click**



hyrax[®]  **neo**



Śruby **hyrax**[®] powinny swobodnie „unosić się” w odległości co najmniej 1-2 mm powyżej łuku podniebiennego. Śruby powinny być ustawione równolegle do płaszczyzny zgryzu, aby uniknąć efektu dźwigni.

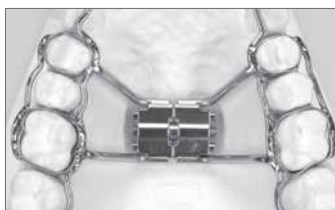

Śruby są mocowane do pierścieni ortodontycznych za pośrednictwem ramion retencyjnych. Do odgięcia ramion retencyjnych zalecane jest zastosowanie uniwersalnego klucza do odginania (REF 611-122-00) bez użycia dodatkowych kleszczy.

Uniwersalny klucz do doginania

REF 611-122-00

Łatwe i delikatne odginanie ramion retencyjnych




Kluczyk do śrub **hyrax**[®]

REF 611-120-01

Odpowiedni do wszystkich śrub **hyrax**[®] firmy Dentaaurum. Bezpieczne aktywowanie śrub ekspansyjnych w aparatach stałych.

Wybór należy do Ciebie!

Wybierz odpowiednią śrubę RPE,
która pasuje do Twojego sposobu pracy!

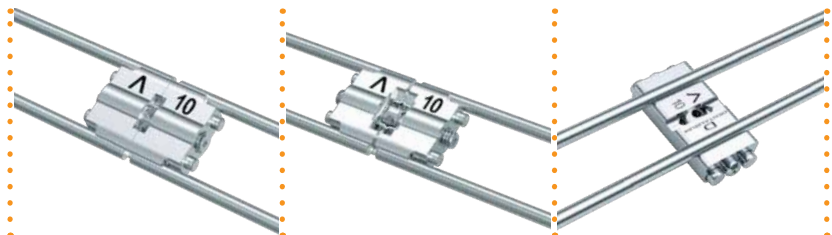

hyrax®

hyrax® **click**

hyrax® **neo**

Solidny korpus

Najwyższa stabilność po pełnej aktywacji



Stabilne prowadzenie

Optymalna konstrukcja prowadnic



Łatwe odginanie

Ramiona retencyjne odporne na pęknięcie; niewielka przestrzeń wymagana do odginania ramion dzięki stopniowej konstrukcji korpusu śruby



Ogranicznik ekspansji



Konstrukcja zoptymalizowana do stosowania w tymczasowych aparatach kotwiących (TAD)

Ramiona retencyjne są ustawione równoległe do szwu podniebiennego



Opatentowana funkcja „Click” zapobiegająca odkręcaniu

Wyjątkowa funkcja blokowania śruby na etapie aktywnego leczenia. Kliknięcie wyczuwalne po każdej 1/4 obrotu



Najwyższe bezpieczeństwo

Zarówno dla ortodontów, jak i pacjentów



Znakowanie laserowe

Strzałki kierunkowe oraz maksymalna ekspansja



Dostępne wersje

Bez ramion retencyjnych



Z prostymi ramionami retencyjnymi



Z wygiętymi ramionami retencyjnymi



Zakres produktów

hyrax®

Produkt	bez ramion retencyjnych	proste ramiona	wygięte ramiona	Ilość
hyrax® Mini – 7 (ekspansja 7 mm)	602-800-12	602-800-10	602-801-10	1
	602-800-32	602-800-30	602-801-30	10
	–	602-800-50	602-801-50	50
hyrax® Medium – 10 (ekspansja 10 mm)	602-808-12	602-808-10	602-840-10	1
	602-808-32	602-808-30	602-840-30	10
	–	602-808-50	602-840-50	50
hyrax® Maxi – 12 (ekspansja 12 mm)	602-811-12	602-811-10	602-812-10	1
	602-811-32	602-811-30	602-812-30	10
	–	602-811-50	602-812-50	50

hyrax® click

Produkt	bez ramion retencyjnych	proste ramiona	wygięte ramiona	Ilość
hyrax® click Mini – 7 (ekspansja 7 mm)	602-830-12	602-830-10	602-831-10	1
	602-830-32	602-830-30	602-831-30	10
	–	602-830-50	602-831-50	50
hyrax® click Medium – 10 (ekspansja 10 mm)	602-832-12	602-832-10	602-833-10	1
	602-832-32	602-832-30	602-833-30	10
	–	602-832-50	602-833-50	50
hyrax® click Maxi – 12 (ekspansja 12 mm)	602-834-12	602-834-10	602-835-10	1
	602-834-32	602-834-30	602-835-30	10
	–	602-834-50	602-835-50	50

hyrax® neo

Produkt	bez ramion retencyjnych	proste ramiona	Ilość
hyrax® neo Mini – 7 (ekspansja 7 mm)	602-845-12	602-845-10	1
	602-845-32	602-845-30	10
	–	602-845-50	50
hyrax® neo Medium – 10 (ekspansja 10 mm)	602-846-12	602-846-10	1
	602-846-32	602-846-30	10
	–	602-846-50	50
hyrax® neo Maxi – 12 (ekspansja 12 mm)	602-847-12	602-847-10	1
	602-847-32	602-847-30	10
	–	602-847-50	50

Titan hyrax®

Produkt	bez ramion retencyjnych	proste ramiona	Ilość
Titan hyrax® Maxi – 12 (ekspansja 12 mm)	602-810-12	602-810-10	1
	602-810-32	602-810-30	10

Opakowanie (1 sztuka / 50 sztuk) z 1 kluczem zabezpieczającym / Opakowanie (10 sztuk) z 10 kluczami zabezpieczającymi

Produkt	REF	Ilość
Kluczyk do śrub hyrax®	611-120-01	10
Uniwersalny klucz do doginania	611-122-00	1

Data wydania: 2022-03

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian.

D
DENTAURUM

Turnstr. 31 | 75228 Ispringen | Niemcy | Tel. +49 72 31/803-0 | Faks +49 72 31/803-295

www.dentaurum.com | info@dentaurum.com